


ULINE S-26497, S-26498 BLACK N95 RESPIRATOR

1-800-295-5510
uline.com

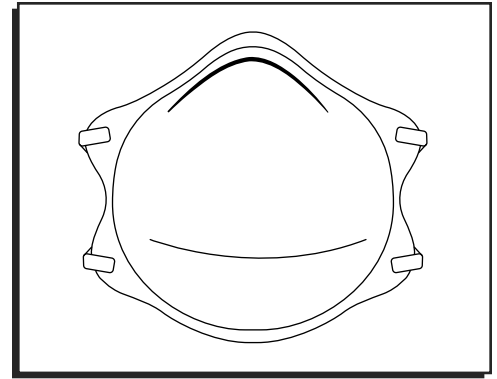

SAFETY

- Wearer must read fitting instructions and use limitations before use.
- This respirator is not guaranteed to protect against the risk of contracting a disease or infection.
- Before occupational use of this respirator, a written respiratory protection program must be implemented meeting all the local government requirements. In the United States, employers must comply with OSHA 29 CFR 1910.134 which includes medical evaluation, training and fit testing.
- Do not use the same respirator for more than 8 hours, continuous or intermittent, in dirty workplaces that could result in high filter loading.
- Leave contaminated area and remove respirator if breathing becomes difficult or proper fit cannot be obtained or the respirator is damaged, soiled or distorted. Do not use the same respirator again once it has been used in contaminated area.
- The maximum service time of this respirator is five (5) consecutive calendar days (including days of non-use), beginning from the first day of use.

SPECIFICATIONS

THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR	CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		S-26497	
84A-7882	N95	X	ABCJMNOPS

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATOR	CAUTIONS AND LIMITATIONS ²
		S-26498	
84A-7883	N95	X	ABCJMNOPS

1. PROTECTION

N95 Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply.


2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.
- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.
- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.
- All approved respirators shall be selected, fitted, used and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- Refer to user's instructions and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.
- Special or critical user's instructions and/or specific use limitations apply. Refer to user's instructions before donning.

FITTING INSTRUCTIONS


1. Hold the respirator in hand with the nosepiece at your fingertips, allowing the headbands to hang freely below your hand. (See Figure 1)

Figure 1

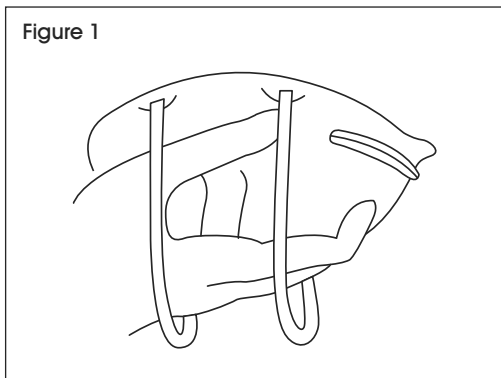


2. Press the respirator firmly against your face with the nosepiece on the bridge of your nose. Stretch and position the top band high on the back of the head. Stretch the bottom band over the head and position below your ears. (See Figure 2)

Figure 2

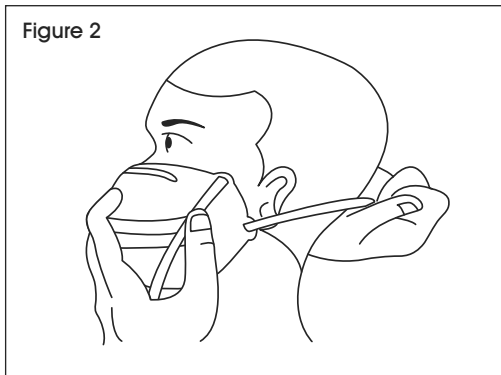

3. Using both hands, mold nosepiece to the shape of your nose. (See Figure 3)

Figure 3

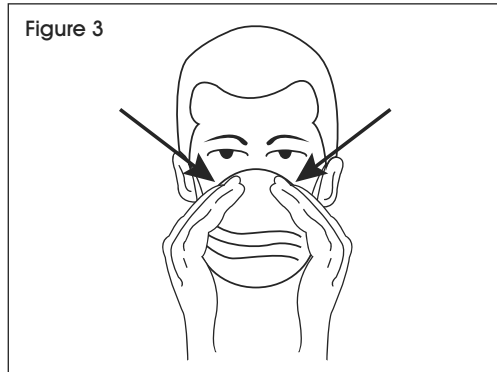


4. To test fit, cup both hands over the respirator, being careful not to disturb position, and inhale vigorously. If air leaks around the edges, reposition the straps or adjust strap tension where applicable for better fit. (See Figure 4)




NOTE: Follow fitting instructions before each use to achieve proper fit.

Figure 4

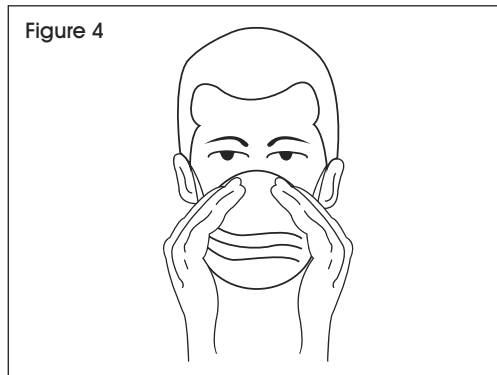

ULINE

1-800-295-5510
uline.com

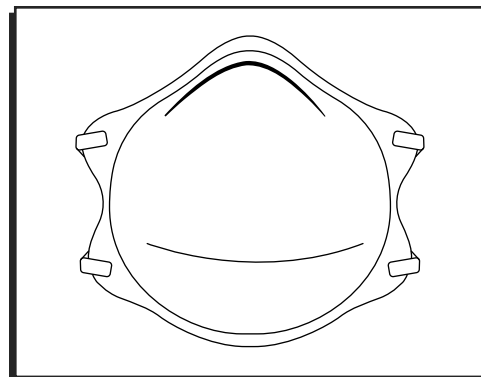

SEGURIDAD

- El usuario debe leer las instrucciones de ajuste y limitaciones de uso antes de usar.
- No elimina el riesgo de contraer una enfermedad o infección.
- Antes del uso ocupacional de este respirador, se debe implementar un programa de protección respiratoria que cumpla con todos los requisitos de gobiernos locales. En los Estados Unidos, los empleadores deben cumplir con OSHA 29 CFR 1910.134, que incluye evaluación médica, capacitación y pruebas de ajuste.
- No use el mismo respirador por más de 8 horas, continua o intermitentemente, en lugares de trabajo sucios que podría resultar en una alta carga del filtro.
- Deje el área contaminada y retire el respirador si se hace difícil respirar, no se puede lograr un ajuste adecuado o si el respirador está dañado, sucio o deformado. No vuelva a usar el mismo respirador una vez que se haya usado en el área contaminada.
- El tiempo de servicio máximo de este respirador son cinco (5) días naturales consecutivos (incluyendo días sin uso), empezando el primer día de uso.

ESPECIFICACIONES

ESTE RESPIRADOR ESTÁ APROBADO SOLO EN LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN:

TC-	PROTECCIÓN¹	RESPIRADOR	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES²
		S-26497	
84A-7882	N95	X	ABCJMNOPS

TC-	PROTECCIÓN¹	RESPIRADOR	PRECAUCIONES Y LIMITACIONES²
		S-26498	
84A-7883	N95	X	ABCJMNOPS

1. PROTECCIÓN

Filtro para Partículas N95 (nivel de eficiencia de filtro de 95%) eficaz contra aerosoles de partículas libres de aceite; podrían aplicar restricciones de tiempo de uso.

2. PRECAUCIONES Y LIMITACIONES


- No apta para uso en ambientes que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
- No apta para uso en ambientes con peligro inmediato a la vida o salud.

- No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por estándares reguladores.
- No usar ni mantener adecuadamente el producto podría resultar en lesiones o la muerte.
- Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, ajustados, utilizados y darles mantenimiento de acuerdo con MSHA, OSHA y otras regulaciones aplicables.
- Nunca sustituya, modifique, añada u omita partes. Use solo partes de repuesto exactas en la configuración según lo especifique el fabricante.
- Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- NIOSH no considera a los respiradores como mascarillas quirúrgicas.
- Instrucciones especiales o importantes del manual del usuario y/o limitaciones de uso aplican. Consulte las instrucciones del usuario antes de usar.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE


1. Sostenga el respirador con el puente nasal en la punta de los dedos, que permita que las bandas para cabeza cuelguen libremente debajo en su mano. (Vea Diagrama 1)

Diagrama 1

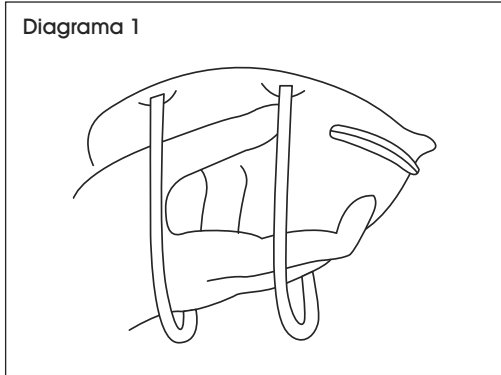


2. Coloque el respirador con firmeza contra su cara con el puente nasal sobre su nariz. Estire y posicione la banda superior alto, en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y colóquela debajo de las orejas. (Vea Diagrama 2)

Diagrama 2

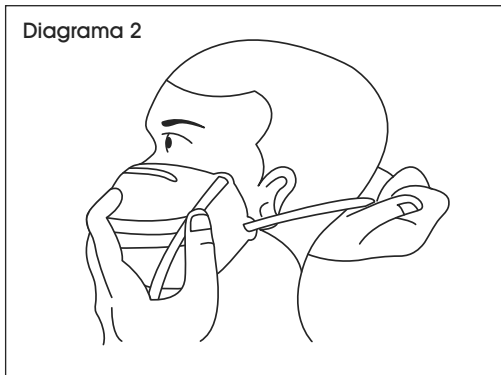

3. Usando ambas manos, moldee el puente nasal a la forma de su nariz. (Vea Diagrama 3)

Diagrama 3

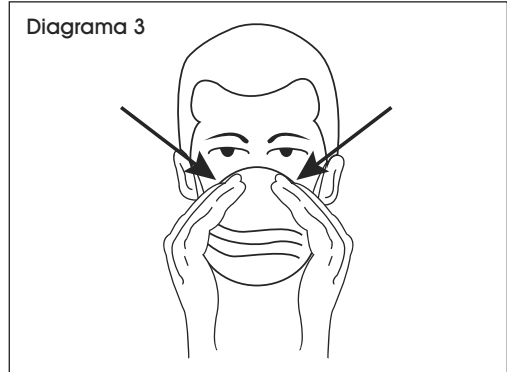


4. Para llevar a cabo una prueba de ajuste, coloque ambas manos sobre el respirador, con cuidado de no alterar la posición e inhale con fuerza. Si el aire se fuga alrededor de las esquinas, reposicione las bandas o ajuste su tensión donde aplique para un mejor ajuste. (Vea Diagrama 4)



NOTA: Siga las instrucciones de ajuste antes de cada uso para lograr un ajuste adecuado.

Diagrama 4

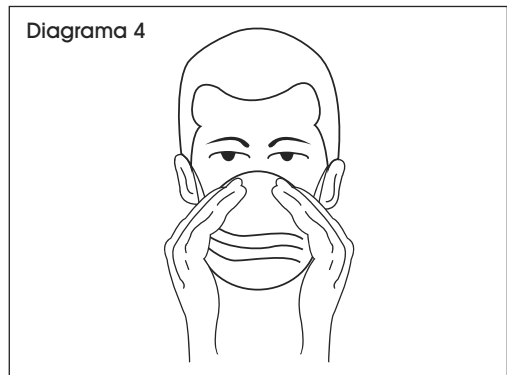


ULINE

800-295-5510
uline.mx

ULINE S-26497, S-26498

RESPIRATEUR N95 – NOIR

1 800 295-5510
uline.ca

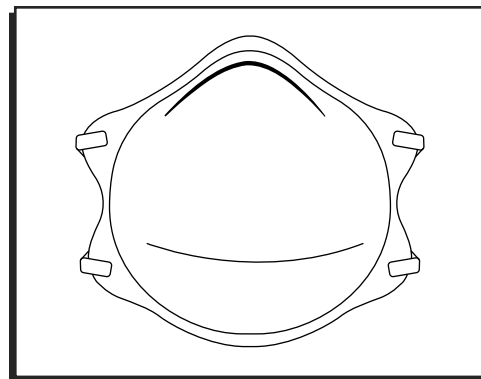

SÉCURITÉ

- L'utilisateur doit lire les instructions d'ajustement et les restrictions d'utilisation avant l'utilisation.
- Ce respirateur ne garantit pas une protection contre le risque de contracter une maladie ou une infection.
- Avant l'utilisation professionnelle de ce respirateur, un programme écrit de protection respiratoire doit être mis en place, conformément à toutes les exigences des autorités locales. Aux États-Unis, les employeurs doivent se conformer à la norme OSHA 29 CFR 1910.134, qui inclut une évaluation médicale, une formation et des tests d'ajustement.
- N'utilisez pas le même respirateur pendant plus de 8 heures, consécutives ou intermittentes, dans les lieux de travail sales susceptibles d'entraîner une charge élevée du filtre.
- Quittez la zone contaminée et retirez le respirateur en cas de difficultés respiratoires, si l'ajustement est incorrect ou si le respirateur est endommagé, souillé ou déformé. Ne réutilisez pas le même respirateur une fois qu'il a été utilisé dans une zone contaminée.
- La durée maximale d'utilisation de ce respirateur est de cinq (5) jours calendaires consécutifs (y compris les jours de non-utilisation), à compter du premier jour d'utilisation.

SPÉCIFICATIONS

CE RESPIRATEUR EST APPROUVÉ UNIQUEMENT DANS LA CONFIGURATION SUIVANTE :

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATEUR	MISES EN GARDE ET LIMITATIONS ²
		S-26497	
84A-7882	N95	X	ABCJMNOPS

TC-	PROTECTION ¹	RESPIRATEUR	MISES EN GARDE ET LIMITATIONS ²
		S-26498	
84A-7883	N95	X	ABCJMNOPS

- N'utilisez pas le produit dans des atmosphères présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé.
- Ne dépassez pas les concentrations d'utilisation maximales établies par les normes réglementaires.
- Le non-respect de l'utilisation et de l'entretien appropriés de ce produit peut entraîner des blessures ou la mort.
- Tous les respirateurs approuvés doivent être sélectionnés, ajustés, utilisés et entretenus conformément aux réglementations MSHA, OSHA et autres réglementations applicables.
- Ne remplacez pas, ne modifiez pas, n'ajoutez pas ou n'omettez pas de pièces. Utilisez uniquement des pièces de rechange exactes telles que spécifiées dans la configuration du fabricant.
- Reportez-vous aux instructions d'utilisation et/ou aux manuels d'entretien pour obtenir des informations sur l'utilisation et l'entretien de ces respirateurs.

1. PROTECTION

Filtre N95 contre les particules (niveau d'efficacité de filtration de 95 %) efficace contre les particules aérosols sans huile; des restrictions de durée d'utilisation peuvent s'appliquer.

2. MISES EN GARDE ET LIMITATIONS

- N'utilisez pas le produit dans des atmosphères contenant moins de 19,5 % d'oxygène.


SPÉCIFICATIONS SUITE

- Le NIOSH n'évalue pas les respirateurs pour utilisation comme masques chirurgicaux.
- Des instructions d'utilisation spéciales ou critiques et/ou des limitations d'utilisation spécifiques s'appliquent. Reportez-vous aux instructions d'utilisation avant de porter le respirateur.

INSTRUCTIONS D'AJUSTEMENT

1. Prenez le respirateur en main, le pont nasal au bout des doigts, en laissant le serre-tête pendre librement sous votre main. (Voir Figure 1)
3. Utilisez vos deux mains pour mouler le pont nasal à la forme de votre nez. (Voir Figure 3)

Figure 1

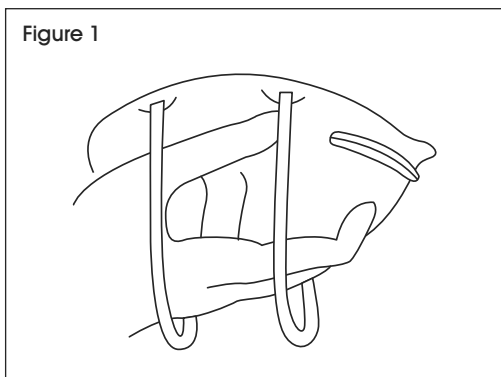

2. Appuyez fermement le respirateur contre votre visage, le pont nasal sur l'arête de votre nez. Étirez et positionnez la bande supérieure du serre-tête haut sur l'arrière de la tête. Étirez la bande inférieure du serre-tête sur la tête et positionnez-la sous vos oreilles. (Voir Figure 2)

Figure 2


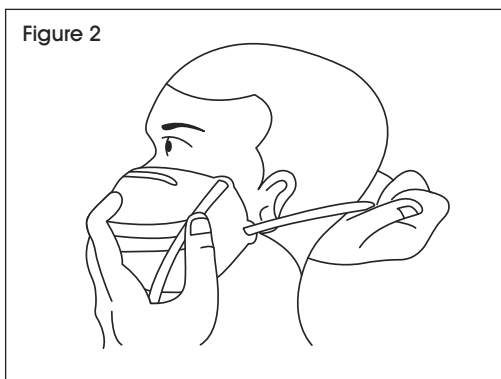


Figure 3




4. Pour tester l'ajustement, couvrez le respirateur avec vos deux mains, en veillant à ne pas changer sa position, et inspirez fortement. Si de l'air s'échappe par les côtés, repositionnez les sangles ou ajustez leur tension si nécessaire, pour un meilleur ajustement. (Voir Figure 4)

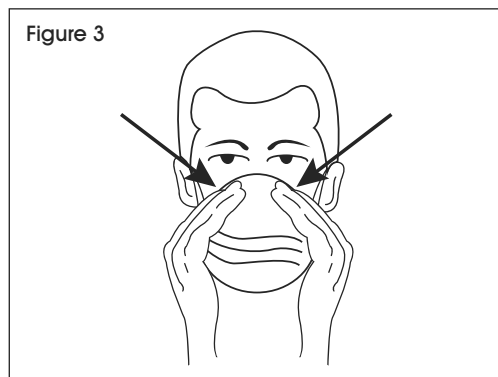

REMARQUE : Suivez les instructions d'ajustement avant chaque utilisation afin d'assurer un bon ajustement.

Figure 4

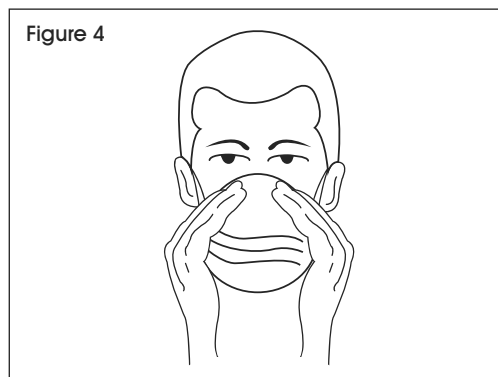

ULINE

1 800 295-5510
uline.ca